

Pack-batterie BTP2-L

Le BTP2-L est un Pack-batterie rechargeable contenant des batteries Lithium-ion de 4000 mAh. Il peut être utilisé comme source d'alimentation principale pour les applications mobiles, et est adapté à une utilisation dans les soins médicaux.



Spécifications & options

Application principale : Médical

- Contient des batteries Lithium-ion d'une capacité de 4000 mAh
- Tension de sortie : 25.6V DC
- Courant de sortie nominal : 6A
- Protection contre les surcharges
- Indicateur de niveau de batterie
- Indice de protection : IPX6
- Avec chargeur spécifié (les cordons d'alimentation secteur doivent être commandés séparément)
- Avec kit de pièces (connecteur DJ7021-2-11)
- Couleur : Gris clair (RAL 7035)

Compatibilité



Produit	Modèle	Exigences de compatibilité
Boîtier de contrôle	BC23	<ul style="list-style-type: none">Connecteur DJ7021-2-11 (male)




Connecteur DJ7021-2-11 (male)

Dimensions

Unité : mm

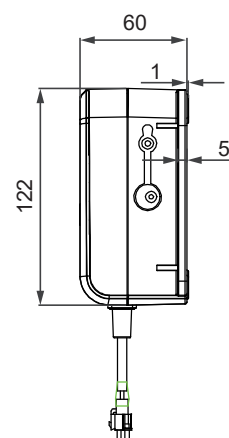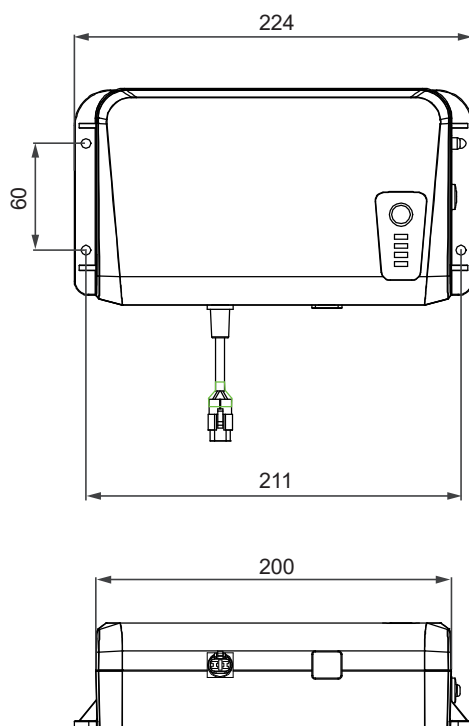

Instructions

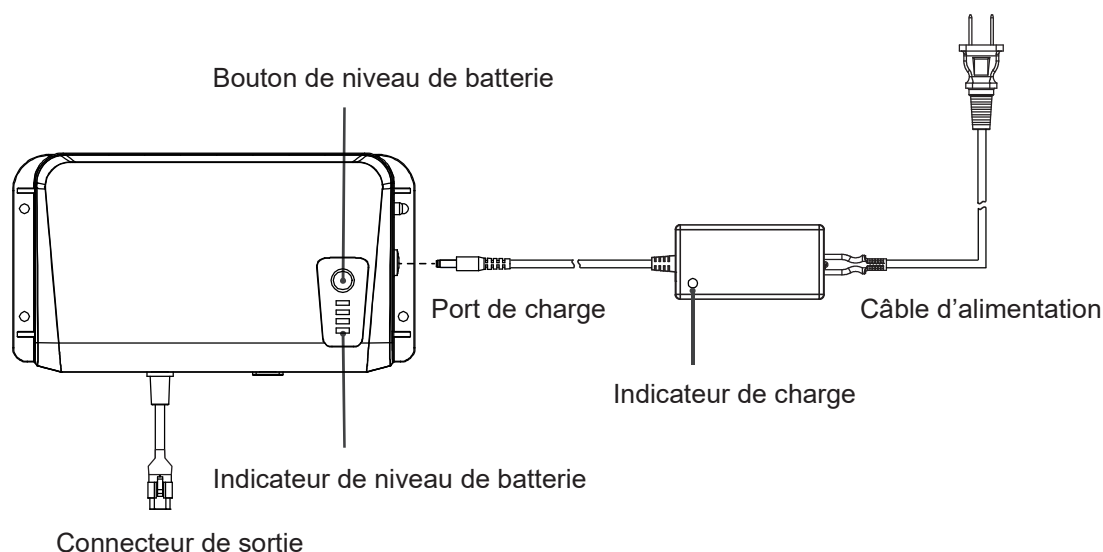

● ON/OFF :

- **ON** : À l'état ARRÊT, maintenez le bouton de niveau de batterie enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur de niveau de batterie s'allume, puis relâchez le bouton.

À ce moment, l'indicateur de niveau de batterie clignote lentement pendant environ 5 secondes selon le niveau de charge correspondant, puis affiche quatre barres fixes, indiquant que la fonction de sortie est ACTIVÉE.

Après environ 5 secondes, l'indicateur à quatre barres s'éteint et la sortie est maintenue jusqu'à la mise hors tension.

- **OFF** : À l'état MARCHÉ, maintenez le bouton de niveau de batterie enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur de niveau de batterie s'allume, puis relâchez le bouton. À ce moment, l'indicateur reste allumé pendant environ 5 secondes, puis s'éteint pour arrêter la sortie.

● Vérification du niveau de batterie :

- À l'état MARCHÉ, appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF puis relâchez-le. L'indicateur de niveau de batterie reste allumé pendant environ 5 secondes selon le niveau de charge correspondant, puis s'éteint.

- À l'état ARRÊT, appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF puis relâchez-le. L'indicateur de niveau de batterie clignote lentement pendant environ 3 secondes selon le niveau de charge correspondant, puis s'éteint.

● **Indicateur de charge :**

Indicateur de niveau de batterie	État
	Batterie pleine
	Environ 75 % de niveau de batterie
	Environ 50 % de niveau de batterie
	Peut être utilisé brièvement, mais à recharger dès que possible
	Charge nécessaire - Utilisation impossible

● **Charge :**

- Ouvrez le bouchon étanche du port de charge, connectez le chargeur spécifié et branchez-le à l'alimentation électrique pour lancer la charge. À ce moment, le voyant du chargeur s'allume en ●, et l'indicateur de niveau de batterie clignote selon le niveau de charge correspondant.
- Lorsque la batterie est pleine, l'indicateur de niveau affiche 4 barres fixes et le voyant de charge passe au ● pour indiquer que la charge est terminée. Débranchez le chargeur et remettez le bouchon étanche en place.
- Évitez toute projection d'eau sur le boîtier batterie lors de la charge ; veuillez noter que la connexion entre le chargeur et l'interface de charge n'est pas étanche à ce moment-là.
- N'utilisez pas de chargeur non spécifié pour la charge.